




山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

班布特罗（BAB）原料质量报告

一、班布特罗单抗效价与抑制实验

本实验在偶联抗原稀释度 8W 倍下初筛班布特罗单抗效价 20W，灵敏度 0.01ppb。

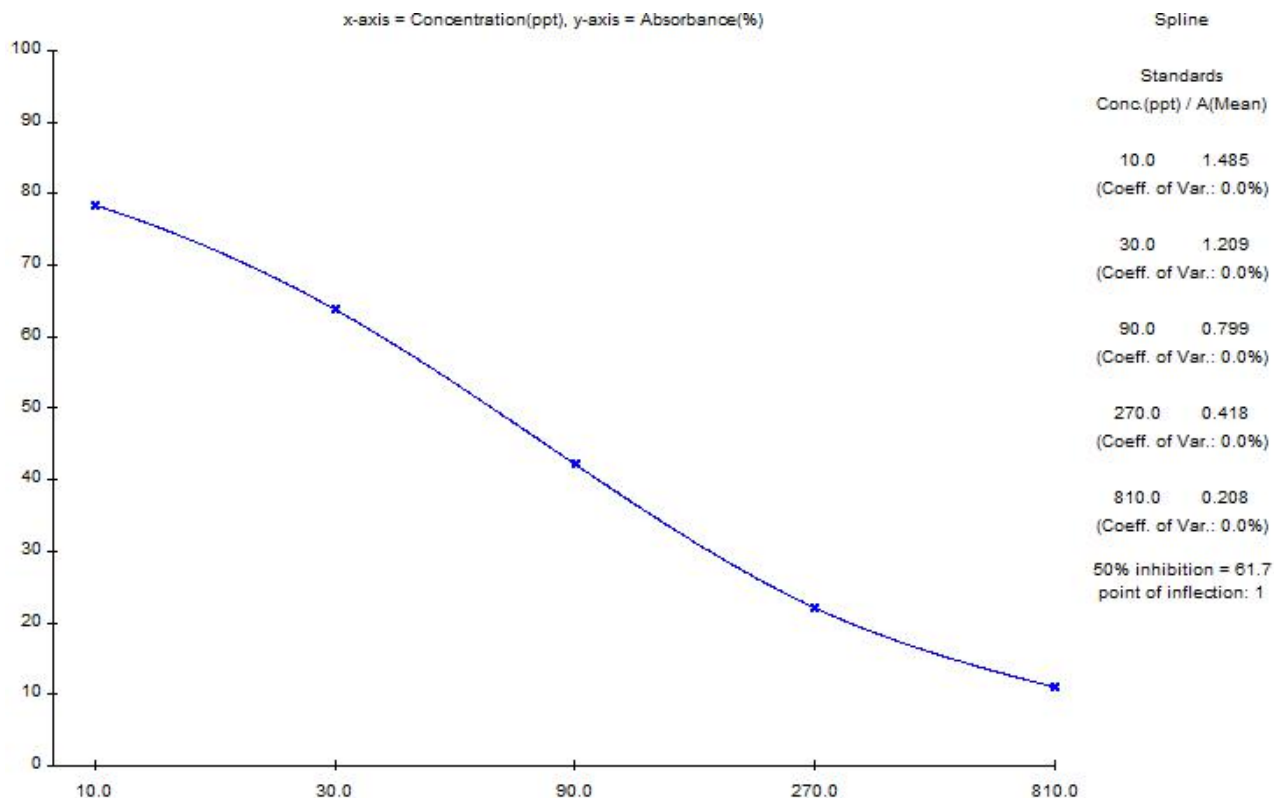

标准曲线图

Standards						
Ser. No.	Concentration ppt	Absorbance (Mean) (CV)	B/B0 (%)	calculated ppt	Deviation (%)	
1	0.0	1.894 0.0	100.0			
2	10.0	1.485 0.0	78.4	10.0	0.0	
3	30.0	1.209 0.0	63.8	30.0	0.0	
4	90.0	0.799 0.0	42.2	90.0	0.0	
5	270.0	0.418 0.0	22.1	270.4	0.1	
6	810.0	0.208 0.0	11.0	808.9	0.1	

数据分析图



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

说明：1. Mean 表示吸光度值的平均值；

2. CV 指平行吸光度值的变异系数，也就是平行孔的差异；



3.本曲线是在偶联抗原最佳稀释度8W 倍，抗体稀释 20W 倍组合下的曲线，标准曲线的线性 $r^2 > 0.99$ 。

二、试剂盒特异性实验

药物名称	交叉反应率 (%)
班布特罗	100%
克伦特罗	< 1%
沙丁胺醇	< 1%

三、胶体金特性

胶体金的灵敏度为 3 ppb，完全消线，线条清晰。

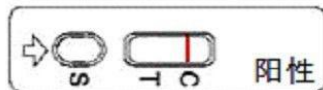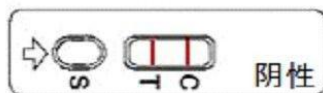

以下两种情况无效

